



QUEST® MPS®

Sistema de protección miocárdica

REF	5001032	Kit de conversión de bloque de bloqueo MPS®2 1	UNIDAD
-----	----------------	--	--------

Uso indicado:

El juego de conversión de bloque de bloqueo MPS2 está indicado para reemplazar el conjunto de bloque de bloqueo MPS2 por el conjunto del bloque de bloqueo de intercambiador de calor (HEX) de convolución MPS2 10-16.

Contraindicaciones:



Este dispositivo está diseñado para usarse con los desechables y la consola Quest MPS2. El uso con otros sistemas está contraindicado. Este dispositivo no se diseñó, no se vende y no se usa para ningún otro uso excepto el indicado.

Advertencias y precauciones:

1. Lea las instrucciones detenidamente. El especialista clínico a cargo solo es responsable de la instalación y el uso del dispositivo. Consulte el manual de operaciones del sistema MPS para ver las instrucciones completas de uso.
2. SOLO debe utilizarse con la consola MPS. NO LO USE para otros propósitos. Todos los reclamos son nulos si se usa por separado.
3. Desempaque los tres paquetes y compruebe que no se hayan producido daños por el transporte. NO USE componentes dañados.
4. El tomacorriente de grado hospitalario o tomacorriente hospitalario apropiado debe tener una conexión a tierra adecuada.
5. La legislación federal (estadounidense) solamente permite que un médico realice ventas o pedidos de este dispositivo.
6. Observe todas las advertencias y precauciones adicionales detalladas en las siguientes instrucciones de uso.

Instrucciones de instalación

1. IMPORTANTE: Antes de la instalación, sujete los tubos de agua con pinzas para evitar un derrame grande durante la conversión.

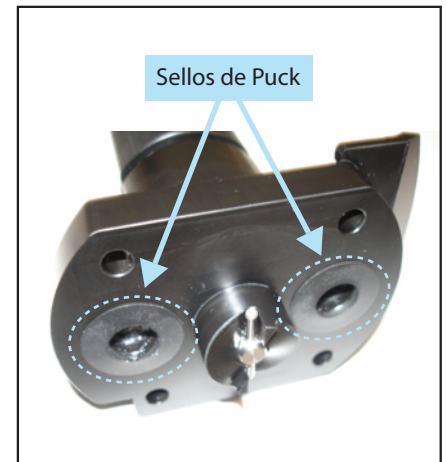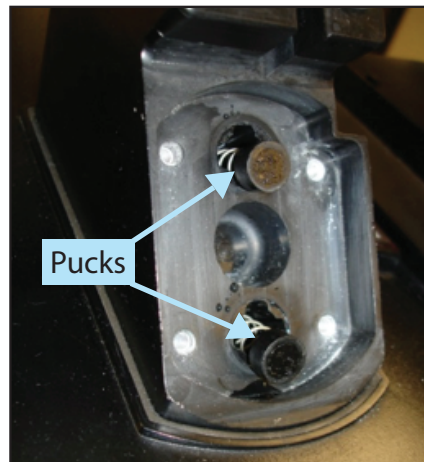

2. Saque los cuatro tornillos que sujetan el conjunto del bloque de bloqueo al bloque del HEX.
Saque el conjunto del bloque de bloqueo.
3. Asegúrese de que los Pucks permanezcan en los resortes.
4. Asegúrese de que los sellos de Puck estén colocados correctamente en los recortes circulares del nuevo conjunto del bloque de bloqueo

For symbols glossary visit www.questmedical.com/resources.aspx



Rx ONLY

MD



QuestMedical.com/elfu

CE
0 1 2 3

EC REP

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT, Arnhem
The Netherlands

 **QUEST Medical, Inc.**

One Allentown Parkway | Allen, Texas 75002 U.S.A. | +1 972 390-9800 | +1 800 627-0226
©2019 Quest Medical, Inc. MPS es una marca registrada de Quest Medical, Inc. La consola MPS y los artículos desechables estériles MPS están cubiertos por una o más de las siguientes patentes de los Estados Unidos: 5,573,502 - 5,588,816 - 5,638,737 - 5,645,531 - 5,899,873. También cubiertos por patentes en proceso y solicitudes de patentes de los Estados Unidos e internacionales.

Hecho en Estados Unidos
904519 REV C
APR 23



5. Coloque el nuevo conjunto de bloque de bloqueo sobre los Pucks. Alinee los Pucks con los orificios provistos en el bloque del HEX con un hemostato para deprimir los resortes.



6. Presione ligeramente el conjunto del bloque de bloqueo en su lugar manteniendo los dos Pucks alineados. El conjunto del bloque de bloqueo debe quedar plano contra la base del bloque de intercambiador de calor. Los Pucks deben estar contra los sellos de Puck.



7. Sujete el conjunto del bloque de bloqueo en su lugar y coloque nuevamente los cuatro tornillos. Apriete cada tornillo de modo que queden bien ajustados

8. Vuelva a conectar los tubos de agua y quite las pinzas de sujeción.

For symbols glossary visit www.questmedical.com/resources.aspx



ONLY



QuestMedical.com/elifu



QUEST Medical, Inc.



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT, Arnhem
The Netherlands

One Allentown Parkway | Allen, Texas 75002 U.S.A. | +1 972 390-9800 | +1 800 627-0226

©2019 Quest Medical, Inc. MPS es una marca registrada de Quest Medical, Inc. La consola MPS y los artículos desechables estériles MPS están cubiertos por una o más de las siguientes patentes de los Estados Unidos: 5,573,502 - 5,588,816 - 5,638,737 - 5,645,531 - 5,899,873. También cubiertos por patentes en proceso y solicitudes de patentes de los Estados Unidos e internacionales.

Hecho en Estados Unidos
904519 REV C
APR 23

Para accionar hasta la posición del intercambiador de calor de convolución 16



Comience desde la posición desbloqueada 10 C.



1. Presione la perilla y gírela 360 grados en sentido contrario de las manecillas del reloj hasta que deje de girar. (La perilla de bloqueo se extenderá hacia afuera)



2. La perilla ahora está en la posición desbloqueada de convolución 16.

Para accionar hasta la posición del intercambiador de calor de convolución 10



Comience desde la posición desbloqueada 16 C.



1. Presione la perilla y gírela 360 grados en sentido de las manecillas del reloj hasta que encajen su lugar.



2. La muesca redondeada de las dos piezas de la perilla ahora deben estar alineadas.



3. La perilla ahora está en la posición desbloqueada de convolución 10.

Si tiene problemas para bloquear un intercambiador de calor, asegúrese de que el bloque de bloqueo esté en la configuración correcta para el juego desechable que desee instalar. Consulte cómo instalar el juego desechable en las instrucciones de uso suministradas con este. Cuando termine de usar esta IFU como hoja de referencia, adjúntela a la parte posterior de su Manual de operaciones de MPS.

For symbols glossary visit www.questmedical.com/resources.aspx